

酸素濃縮器
KM-X
＜ケイエム・エックス＞


いつでも何処でもサポートします
軽量でコンパクトだから
持ち運べる持ち込める
バッテリー式の携帯型酸素濃縮器



KOIKEMEDICAL

酸素濃縮器 KM-X koike medical

操作パネル

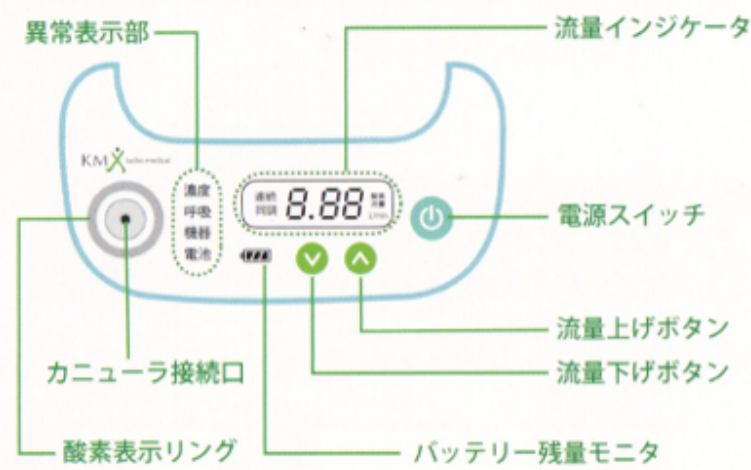

仕様

一般的名称	酸素濃縮装置
販売名	酸素濃縮器 KM-X
認証番号	220AGBZX00275000
酸素濃度	90%±3%
酸素供給モード	連続モード 0.25~1.00L/分 (0.25L/分刻み) 同調モード 1.25~2.00L/分 (0.25L/分刻み)
流量精度	±10%、又は 0.2L/分のいずれか大きい方
呼吸回数	10~30回呼吸/分
同調感度	-0.5kPa
バッテリー使用時間	2時間 (20回呼吸/分、2L/分設定)
消費電力	50W 以下 (充電無し動作時) 90W 以下 (充電中動作時)
警報・安全装置	酸素濃度低下、停電警報、呼吸未検出時警報、 流量異常、バッテリー残量警報、圧力異常他
外形寸法	H: 310×W: 270×D: 190mm
重量	5.8kg (バッテリー含まず)
電源形式	・ACアダプタ: 100~240VAC、50/60Hz、2.0A ・自動車用アダプタ: 12VDC、8.0A
電撃保護	クラスII機器、B型装着部、内部電源機器
医療機器類別	管理医療機器・特定保守管理医療機器

保守パネル

- 本体背面の保守パネルにより、積算時間、酸素濃度流量などさまざまな確認を実施できます。また、アラーム類のON/OFF設定も実施することができます。
- 流量ブロック機能：
この機能は最大3つまでの流量をロックすることができます。例えば 1.00L/分から 2.00L/分への酸素流量を増やすときには、操作ボタンの上ボタンを 0.25L/分刻みに4回押さなければなりません。ブロック機能ですと1回押すだけで 1.00L/分から 2.00L/分を選択することができます。

■構成品：本体、添付書、取扱説明書、ACアダプタ、空気取入フィルター

■アクセサリ（オプション）



・カー用シガーライター ・専用バッテリー

注意 正しく安全にお使いいただくために
ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

- 製品の色は印刷物です。実際の色と多少異なる場合があります。
- 製品の定格及びデザインは、改善等の為予告なく変更する場合があります。

酸素濃縮器 KM-X
＜ケイエム・エックス＞




KM-Xで、魅力的な暮らし方。


くるまの助手席に、カートで持ち運べる、持ち込める携帯型酸素濃縮器。
いつでも・どこでも身近で優しくサポートします。

コンパクト・軽量だからできること！

テクノロジーの進化と共に、小型・軽量化が実現しました。これからも、進化を追求、新しい生活へ！！

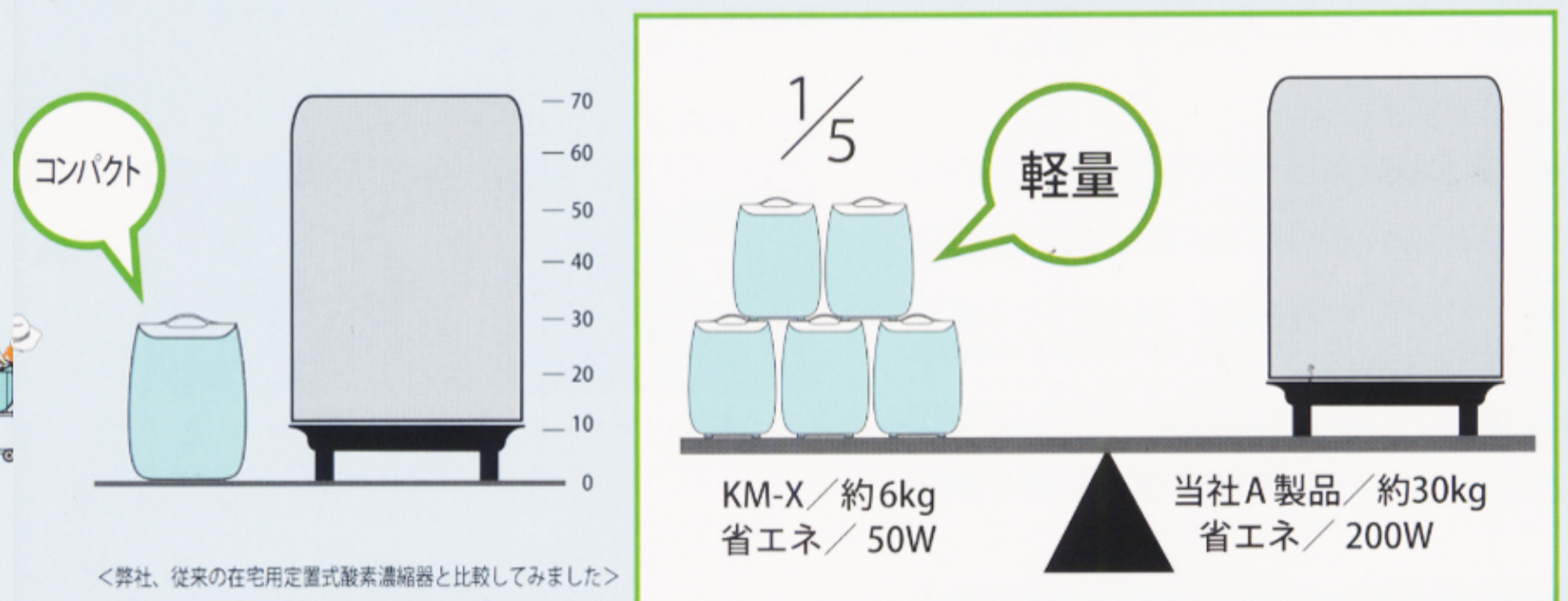

酸素の補充はどうしてますか！

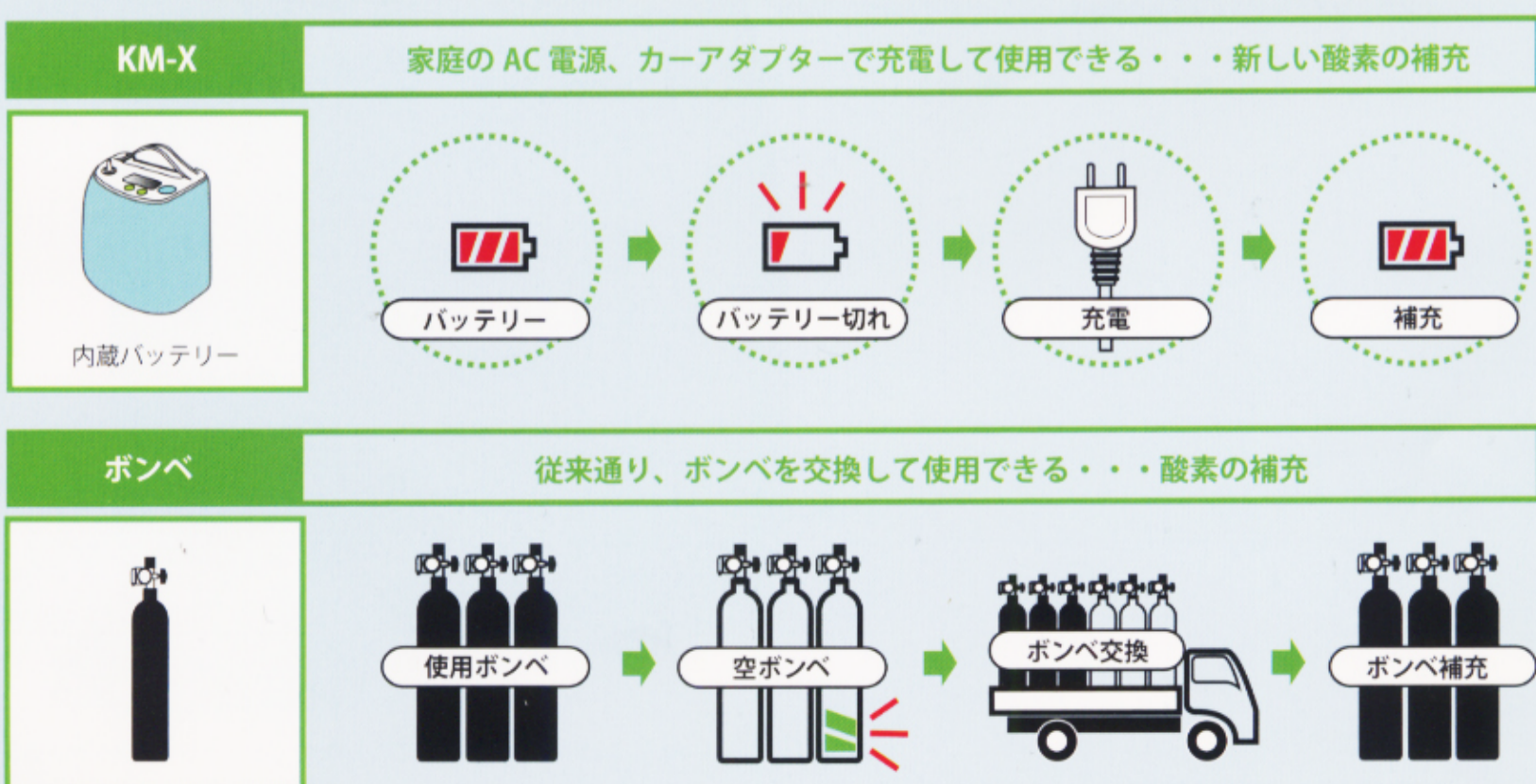

呼吸に併せて酸素を調整！

